

Echo



Care Relax \

Voor een goed boek, ontspannend tv-moment of even rustig genieten. Instapmodel met hoge graad van zelfbediening. Geriatische relaxfauteuil, met een heel goed zitcomfort (ideaal voor ouderenzorg). Concept van de zetel (zithoogte/armen) draagt bij tot gemakkelijk opstaan uit de zetel.

Wat maakt de Echo Care Relax zo uniek? \

- \ \ Gebruiksvriendelijk
- \ \ Tal van zijpanden
- \ \ Evenwicht tussen prijs, comfort en kwaliteit

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OVERZICHT ECHO CARE RELAX



Armen

Beschikbaar in 7 verschillende armen, zowel open als gesloten en in verschillende soorten materialen.

Meer info op pagina 5

Verstelmechaniek

4 verschillende manuele verstelmechanieken mogelijk. Beschikbaar met of zonder beensteun en optionele (verstelbare) voetenbank bij een Echo zonder beensteun.

Meer info op pagina 3-4

Frame & wielen

Beschikbaar met 4 verschillende soorten onderstellen, afhankelijk van frame, grootte van de wielen en remtechniek.

Meer info op pagina 5

Opties & accessoires

De Echo Care Relax bevat een hele hoop opties en accessoires om de care relax aan te passen aan de noden van de gebruiker.


Meer info op pagina 7

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


VERSTELMECHANIEKEN





VASTE UITVOERING

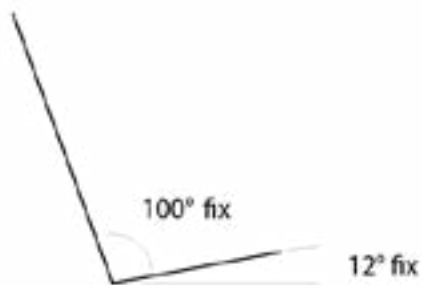

Vaste uitvoering, niet verstelbaar, zonder beensteun.
Optioneel: vaste of verstelbare voetenbank.

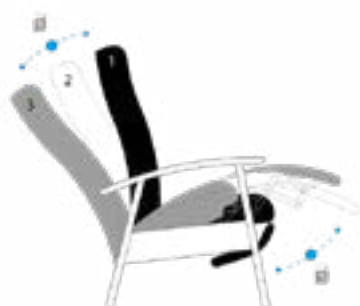


SR

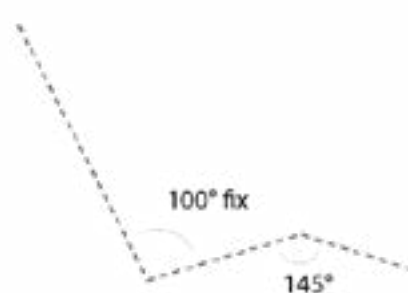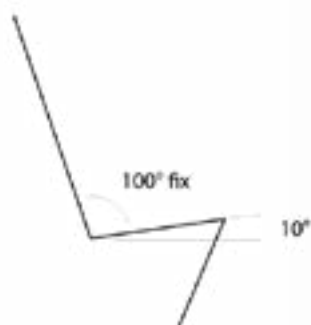


Zit en rug verstelbaar met vaste inclinatiehoek. Automatisch mee uitklappende beensteun.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


VERSTELMECHANIEKEN

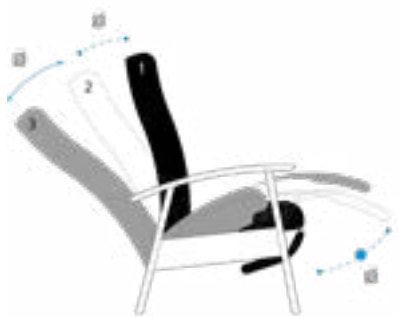


2S

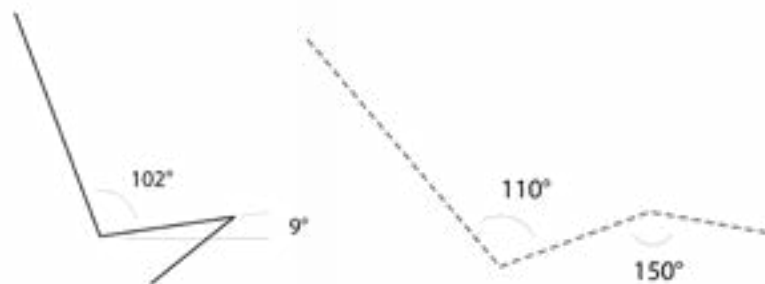

Zit en rug zijn verstelbaar met een afzonderlijk verstelbare rug.
Automatisch mee uitklapbare beensteun.
De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 122° in de relaxpositie.

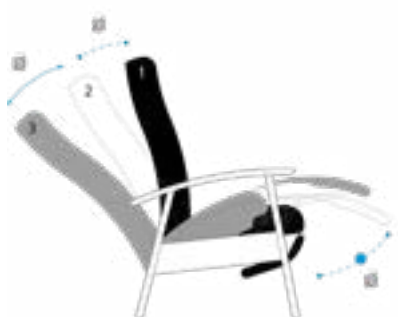

EL

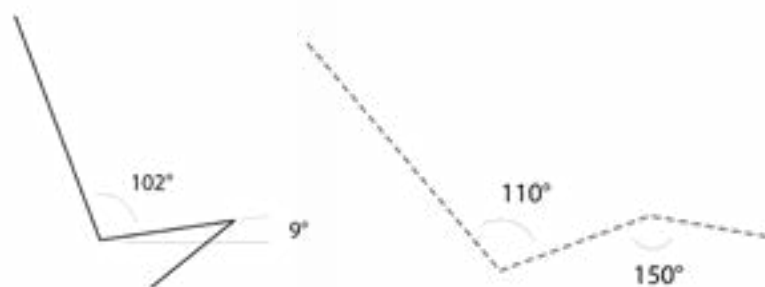


Zit en rug zijn elektrisch verstelbaar met een bijkomend afzonderlijk verstelbare rug. Automatisch mee uitklapbare beensteun.
De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 122° in de relaxpositie.


Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ARMEN


De Echo kan voorzien worden van verschillende zijpanden/armen: van een comfortabele, volledig gestoffeerde arm tot een neerschuifbare arm. Naar gelang het type arm is het al dan niet mogelijk hierop een leeftablet te plaatsen.

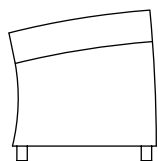


CLASSIC

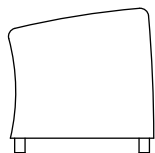


HARMONY

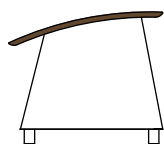


WOOD

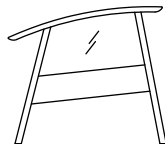

COSY

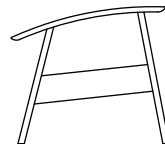


FOREST

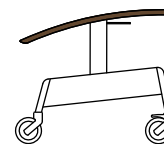


FOREST NS

FRAME & WIELEN


Er zijn volgende varianten mogelijk:

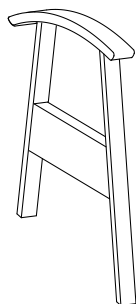


Zonder wielen

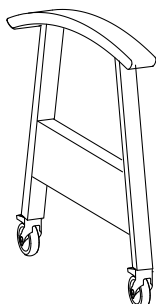

Wielen Ø75

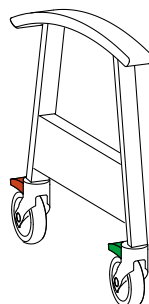

Wielen Ø125

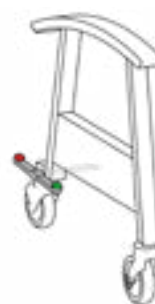






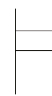





Wielen Ø125,
met centrale rem

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

TYPE											
Echo	70-82	85 - 94	113	55	50	49	74	69 - 70	28 - 38	ja	★ ★ ★
Voetenbank vast	53	43	43	-	-	-	-	-	4,1	ja	★ ★ ★
Voetenbank verstelbaar	53	43	43	-	-	-	-	-	4,2	ja	★ ★ ★

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik

ZIT, RUG EN BEENSTEUN

Zit, rug en beensteun (met uitzondering van SR – dit zonder beensteun) zijn gestoffeerd. De care relax biedt een hoog en comfortabel zitcomfort voor de gebruiker. Rug bestaande uit multiplex frame met elastische singels en polyether schuim. Zit bestaande uit multiplex met nosag veren en HR schuim. Stoffering van de beensteun loopt door tot aan de zitting.

BEDIENING VAN ECHO ELEKTRISCH

De Echo elektrisch is standaard voorzien van een stroomkabel. Via de eenvoudige handbediening kan de Echo gemakkelijk in de gewenste relaxposities geplaatst worden. De rug en beensteun zijn synchroon elektrisch verstelbaar via een eenvoudige handbediening.

Om meer bewegingsvrijheid te hebben binnen de ruimte, kan er geopteerd worden om te werken met een vast geïntegreerde, niet uitneembare batterij met batterijlader. Zo kan je eenvoudig waar dan ook gebruik maken van de elektrische verstelmechaniek zonder aangesloten te zijn op netstroom.

CE-GEKEURD

De elektrische versie van de Echo relax is CE gekeurd volgens de machinerichtlijn. Hierbij wordt een analyse gemaakt van alle mogelijke risico's bij gebruik van het product. Deze risico's werden vervolgens aangepakt tijdens het uitwerken van het product. Bovendien beschikken alle elektrische onderdelen eveneens over een CE keuring en zijn daarom veilig in gebruik. CE-verklaring goedgekeurd door gerenomeerd keuringsbureau Vincotte.



Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OPTIES

		ECHO					
		CLASSIC	HARMONY	WOOD	COSY	FOREST	FOREST NS
Vaste schoudersteun	-A	■	■	■	■	■	■
2 verplaatsingswielen op de achterste poten	-B				■	■	■
Inschuifbare voetensteun	-C	■	■	■	■	■	
Kunststof duwbeugel	-D	■	■	■	■	■	
Geïntegreerde riem	-E	■	■	■	■	■	■
Fixatiebeugels	-F	■	■	■	■	■	■
Half beklede armsteun	-G			■	■	■	■
Geheel beklede armsteun	-H			■	■	■	■
Voorziening voor abductieklos op leeftablet	-I			■	■	■	■
Voorziening opberging kunststof leeftablet	-J			■	■	■	■
Lagere zithoogte: -4cm <i>Enkel in versie zonder wielen en voetensteun</i>	-K	■	■	■	■	■	■
Vaste batterij met batterijlader <i>Enkel bij Echo EL</i>	-L	■	■	■	■	■	■



A - vaste schoudersteun



B - 2 verplaatsingswielen op de achterste poten



C - inschuifbare voetensteun



D - kunststof duwbeugel



F - fixatiebeugels



G - half beklede armsteun



H - geheel beklede armsteun

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

ACCESSOIRES

		ECHO					
		CLASSIC	HARMONY	WOOD	COSY	FOREST	FOREST NS
Leeftablet kunststof	-1			■	■	■	■
Abductieklos op leeftablet	-2			■	■	■	■
Opberging kunststof leeftablet	-3			■	■	■	■
Anatomische reductor romp	-4	■	■	■	■	■	■
Urinezakhouder	-5					■	■
Los nekkussen	-6	■	■	■	■	■	■
Losse riem	-7	■	■	■	■	■	■
Voetenbank vast	-8	■	■	■	■	■	■
Voetenbank verstelbaar	-9	■	■	■	■	■	■



4 - anatomische reductor romp



5 - urinezakhouder



6 - los nekkussen



9 - voetenbank verstelbaar

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OVERZICHT MODELLEN



ECHO CLASSIC VAST



ECHO CLASSIC
WIELEN Ø 75



ECHO CLASSIC
WIELEN Ø 125



ECHO HARMONY VAST



ECHO HARMONY
WIELEN Ø 75



ECHO HARMONY
WIELEN Ø 125



ECHO WOOD VAST



ECHO WOOD WIELEN Ø 75



ECHO WOOD WIELEN Ø 125

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

OVERZICHT MODELLEN



ECHO COSY VAST



ECHO COSY WIELEN Ø 75



ECHO COSY WIELEN Ø 125



ECHO COSY WIELEN Ø 125
CENTRAAL GEREMD



ECHO FOREST VAST



ECHO FOREST
WIELEN Ø 75



ECHO FOREST
WIELEN Ø 125



ECHO FOREST WIELEN Ø 125
CENTRAAL GEREMD



ECHO FOREST NS
WIELEN Ø 125



ECHO FOREST NS
WIELEN Ø 125 CENTRAAL GEREMD

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie