

Echo



Fauteuil de soins \

S'offrir une pause lecture agréable, profiter d'un moment de détente devant la télévision ou se reposer, tout simplement. Modèle d'entrée de gamme disponible avec un niveau d'autonomie élevé.

Offrant à tout moment un confort d'assise optimal, ce fauteuil relax est idéal dans un environnement de soins aux personnes âgées. Son design (hauteur de l'assise/des accoudoirs) permet de se lever facilement du fauteuil.

Qu'est-ce qui rend le fauteuil de soins Echo si unique? \

- \\ Facile à utiliser
- \\ Nombreux types d'accoudoirs disponibles
- \\ Bon rapport qualité, prix et confort

.....
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

APERÇU FAUTEUIL DE SOINS ECHO



Accoudoirs

Proposé avec 7 modèles d'accoudoirs différents, fermés ou ouverts et en différents matériaux.

Plus d'informations en page 4

Mécanismes de réglage

4 mécanismes de réglage différents disponibles. Disponible avec ou sans repose-jambes et repose-pieds (réglable) en option pour le modèle Echo sans repose-jambes.

Plus d'informations en pages 3-4

Châssis & roues

Disponible avec 4 types de cadres différents en fonction du châssis, de la taille des roues et du mécanisme de freinage.

Plus d'informations en page 4


Options et accessoires

Le fauteuil de soins Echo dispose d'un grand nombre d'options et accessoires permettant de l'adapter aux besoins de l'utilisateur.

Plus d'informations en page 7




Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

MÉCANISMES DE RÉGLAGE

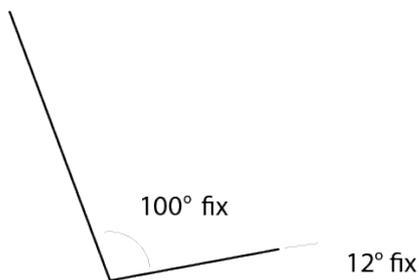


VERSION FIXE

Version fixe, non réglable, sans reposejambes.
En option : repose-pieds fixe ou réglable.

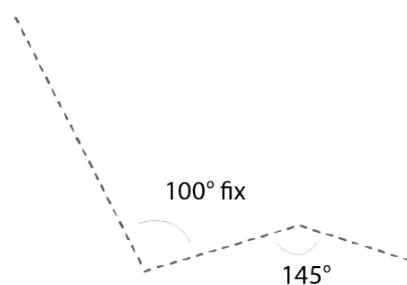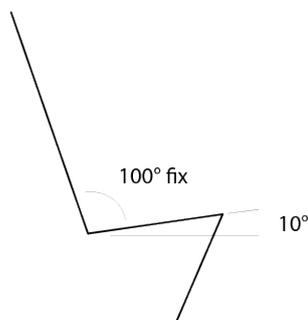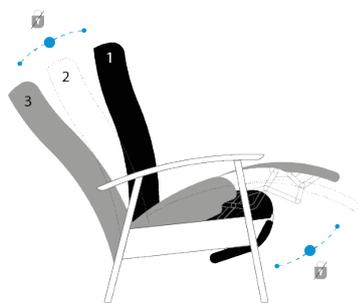


SR

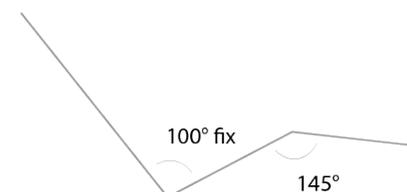


L'assise et le dossier peuvent être facilement réglés, inclinaison fixe. Repose-jambes escamotable automatiquement.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration


MÉCANISMES DE RÉGLAGE

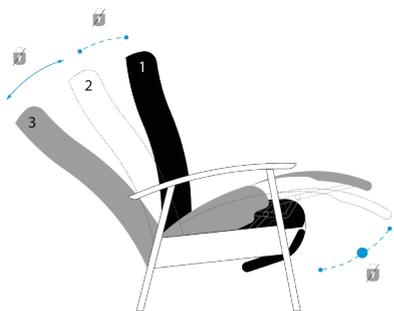


2S

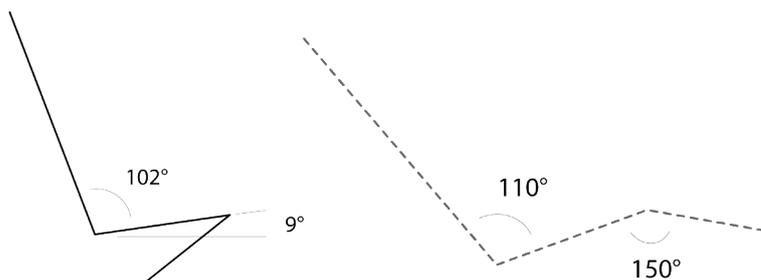

Siège, dossier et repose-jambes réglables avec repose-jambes escamotable automatiquement.
L'angle maximum entre le dossier et l'assise atteint 122° en position de relaxation.

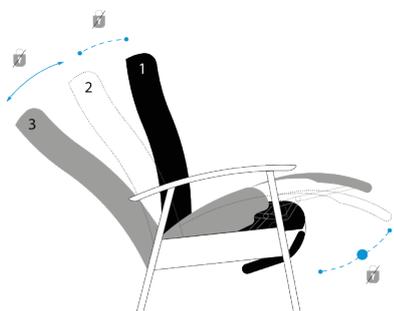

EL

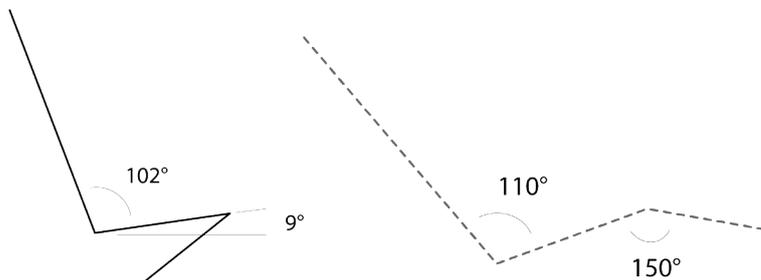


Siège, dossier et repose-jambes réglables électriquement avec repose-jambes escamotable automatiquement.
L'angle maximum entre le dossier et l'assise atteint 122° en position de relaxation.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

ACCOUDOIRS

Le modèle Echo peut être équipé de différents panneaux latéraux/accoudoirs : entièrement rembourrés ou escamotables. Selon le type d'accoudoirs, il est éventuellement possible d'y associer une tablette.

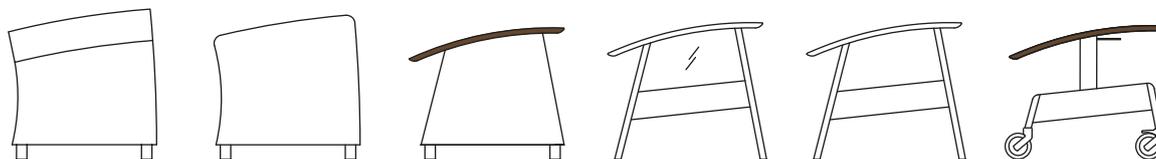

CLASSIC

HARMONY

WOOD


COSY

FOREST

FOREST NS

CHÂSSIS & ROUES

Les versions suivantes sont disponibles :

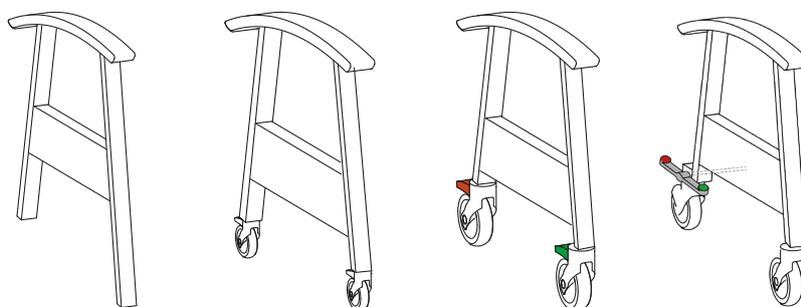

Sans roues

Roues Ø75

Roues Ø125

Roues Ø125,
avec frein centralisé

.....
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

TYPE											
Echo	70-82	85 - 94	113	55	50	49	74	69 - 70	28 - 38	oui	★ ★ ★
Repose-pieds fixe	53	43	43	-	-	-	-	-	4,1	oui	★ ★ ★
Repose-pieds réglable	53	43	43	-	-	-	-	-	4,2	oui	★ ★ ★

★ = usage domestique / ★ ★ = usage professionnel / ★ ★ ★ = usage professionnel intensif

DOSSIER, ASSISE ET REPOSE-JAMBES

Dossier, assise et repose-jambes (à l'exception du modèle SR, qui n'a pas de repose-jambes) sont rembourrés. Confort d'assise exceptionnel. Dossier composé d'un cadre en multiplex avec des sangles élastiques et du mousse polyéther. Assise en multiplex avec ressorts Nosag et mousse HR. Le rembourrage du repose-jambes s'étend jusqu'à l'assise.

FONCTIONNEMENT DE L'ECHO ÉLECTRIQUE

Le modèle Echo électrique est équipé en standard d'une alimentation électrique par câble. L'Echo peut facilement être placé dans la position de relaxation ou la position couchée souhaitée. Le dossier et le repose-jambes sont réglables électriquement de manière synchrone à l'aide d'une simple commande manuelle.

Pour bénéficier d'une plus grande liberté de mouvement dans la pièce, vous pouvez opter pour une batterie inamovible intégrée en permanence, avec chargeur de batterie. De cette manière, vous pouvez utiliser le mécanisme de réglage électrique n'importe où, sans être branché sur le secteur.

HOMOLOGATION CE

La version électrique de l'Echo relax porte le marquage CE conformément à la directive sur les machines. Cela implique l'analyse de tous les risques possibles lors de l'utilisation du produit. Ces risques ont été pris en compte lors du développement du produit. En outre, tous les composants électriques ont également une déclaration CE et peuvent donc être utilisés en toute sécurité. Déclaration CE approuvée par l'agence d'inspection renommée Vincotte.



.....
 Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

OPTIONS

	ECHO					
	CLASSIC	HARMONY	WOOD	COSY	FOREST	FOREST NS
Support oreillettes fixe	-A	■	■	■	■	■
2 roulettes de déplacement sur les pieds arrière	-B			■	■	■
Repose-pieds escamotable	-C	■	■	■	■	
Guidon en matière synthétique	-D	■	■	■	■	
Ceinture intégrée	-E	■	■	■	■	■
Supports de fixation	-F	■	■	■	■	■
Accoudoir partiellement garni	-G			■	■	■
Accoudoir totalement garni	-H			■	■	■
Pré-équipement pour selle d'adduction	-I			■	■	■
Pré-équipement pour fixation porte-tablette	-J			■	■	■
Hauteur basse du siège : -4cm <i>Uniquement en version sans roulettes et sans repose-pieds</i>	-K	■	■	■	■	■
Batterie fixe avec chargeur de batterie <i>Uniquement avec Echo EL</i>	-L	■	■	■	■	■



A - support oreillettes fixe



B - 2 roulettes de déplacement sur les pieds arrière



C - Repose-pieds escamotable



D - Guidon en matière synthétique



F - supports de fixation



G - accoudoir partiellement garni



H - accoudoir totalement garni

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

ACCESSOIRES

		ECHO					
		CLASSIC	HARMONY	WOOD	COSY	FOREST	FOREST NS
Tablette en matière synthétique	-1			■	■	■	■
Selle d'adduction sur tablette	-2			■	■	■	■
Fixation porte-tablette	-3			■	■	■	■
Réducteur anatomique torse	-4	■	■	■	■	■	■
Porte-sac à urine	-5					■	■
Repose-nuque amovible	-6	■	■	■	■	■	■
Ceinture indépendante	-7	■	■	■	■	■	■
Repose-pieds fixe	-8	■	■	■	■	■	■
Repose-pieds réglable	-9	■	■	■	■	■	■



4 - réducteur anatomique torse



5 - porte-sac à urine



6 - repose-nuque amovible



9 - repose-pieds réglable

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

LISTE DES MODÈLES



ECHO CLASSIC FIXE



ECHO CLASSIC
ROUES Ø 75



ECHO CLASSIC
ROUES Ø 125



ECHO HARMONY FIXE



ECHO HARMONY
ROUES Ø 75



ECHO HARMONY
ROUES Ø 125



ECHO WOOD FIXE



ECHO WOOD ROUES Ø 75



ECHO WOOD ROUES Ø 125

.....
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

LISTE DES MODÈLES



ECHO COSY FIXE



ECHO COSY ROUES Ø 75



ECHO COSY ROUES Ø 125



ECHO COSY ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL



ECHO FOREST FIXE



ECHO FOREST
ROUES Ø 75



ECHO FOREST
ROUES Ø 125



ECHO FOREST ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL



ECHO FOREST NS
ROUES Ø 125



ECHO FOREST NS
ROUES Ø 125 FREIN CENTRAL

.....
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2024-08, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration